

# Sicherheits- und Anwendungshinweise für das Wärmepflaster

## Die Hinweise gelten für alle Produktgrößen und Varianten

### 1. Aktivierung und Anwendung:

- Das Wärmepflaster wird durch Luftkontakt selbst aktiviert und erfordert kein Vorwärmen. Das Wärmepflaster wird durch Luftkontakt aktiviert und muss nicht vorgewärmt werden.
- Es ist **ausschließlich für die Anwendung auf der Kleidung** vorgesehen und **darf nicht direkt auf die Haut** geklebt werden.

### 2. Temperatur und Vorsichtsmaßnahmen:

- Die maximale Temperatur beträgt 63°C, mit einer durchschnittlichen Wärme von 53°C.
- Bei längerer Anwendung ist die Haut regelmäßig zu kontrollieren, um Hautirritationen zu vermeiden.

### 3. Anwendungsbereiche:

- Das Pflaster eignet sich besonders für Nacken, Schultern und Rücken, wo es sicher auf der Kleidung haftet.

**Kontakt Hersteller:** [2753332810@qq.com](mailto:2753332810@qq.com)

Trading GmbH  
se 61  
n  
adical.com  
a-medical.com



2027.05.25

Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd.  
NO.4, 2nd Area, SME Pioneer Park, Industry  
ClusterZone,  
Huaiyang county, Zhoukou city, Henan, China




2024.05.26



20240526



Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr.1, 47877 Willich, Germany

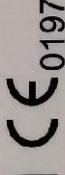

Made in PRC

Wasser, Salz, Aktivkohle, Vermiculit  
r, water, salt, Activated carbon, Vermiculite  
er, eau, sel, Charbon actif, Vermiculite  
ere, acqua, sale, Carbone attivo, Vermiculite  
polvo, agua, sal, Carbón activado, Vermiculita

UDI




(01) 1 6950562 984014  
(17) 270525  
(10) 20240526



231  
PVC  
COP  
Plastica  
**RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
Verifica le disposizioni del tuo Comune

 IEA International Trading GmbH  
Grünwalder Straße 61  
D-81547 München  
Web: [www.ia-medical.com](http://www.ia-medical.com)  
Mail: [service@ia-medical.com](mailto:service@ia-medical.com)

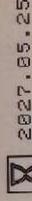

2027.05.25

Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd.  
No.4, Zhiyi Area, SWE Pioneer Park, Industry  
Cluster Zone,  
Huaiyang county, Zhucou city, Henan, China



REF 2024.05.26

LOT 20240526


EC REP

Luxus Lebensmittel GmbH  
Kochstr.1, 47877 Willich, Germany

MDI CE 0197


Made in PRC

DE - Inhaltsstoffe: Eisenpulver, Wasser, Salz, Aktivkohle, Vermiculit  
EN - Ingredients: Iron powder, water, salt, Activated carbon, Vermiculite  
FR - Ingrédients: poudre de fer, eau, sel, Charbon actif, Vermiculite  
IT - Ingredienti: Ferro in polvere, acqua, sale, Carbono attivo, Vermiculite  
ES - Ingredientes: Hierro en polvo, agua, sal, Carbon activado, Vermiculita

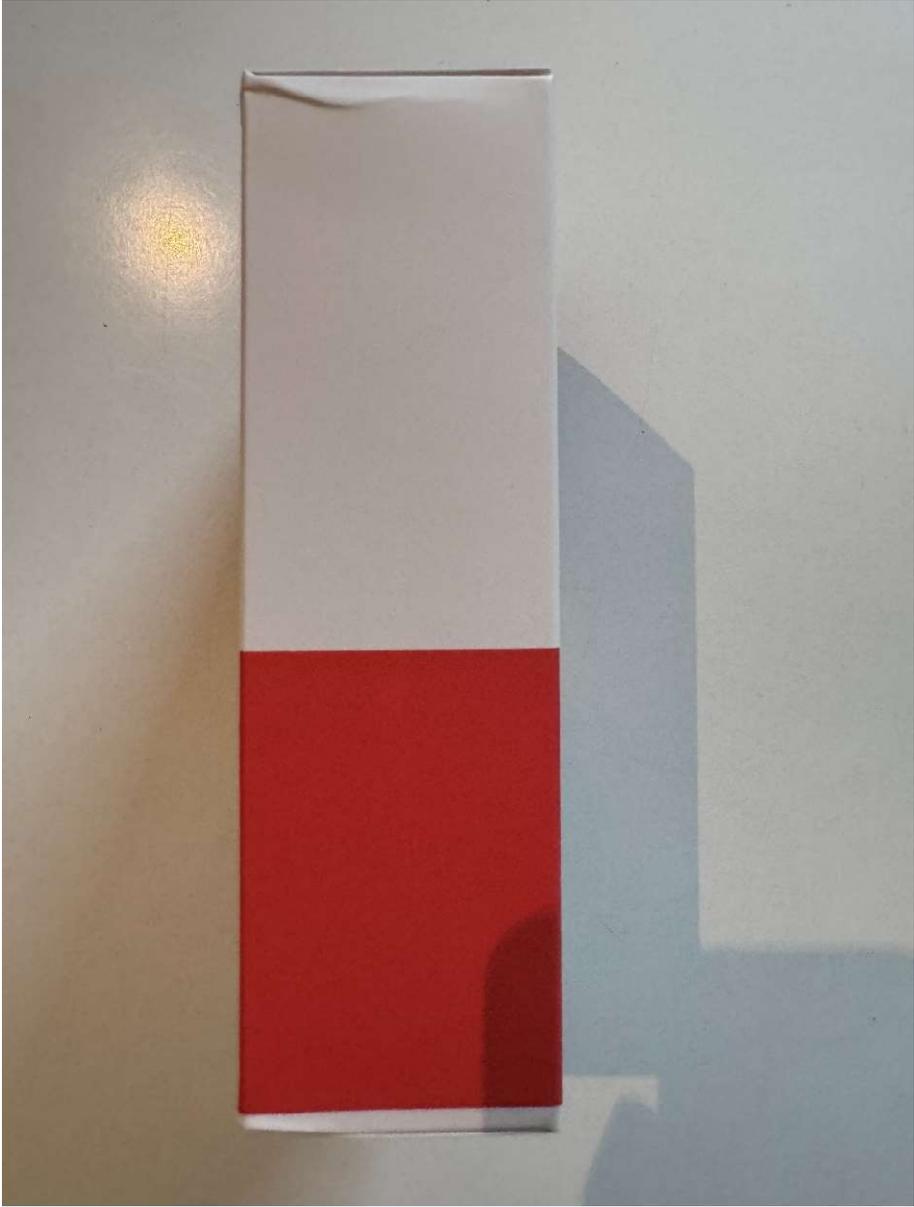



Max. 63°C  
Ø 53°C

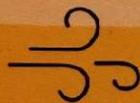

Selbstaktivierend  
Air activated



**DE**

- Bis zu 12 Stunden wohltuende Wärme
- Besonders schnelle Wärmeentwicklung
- Selbstaktivierend durch Luftkontakt
- Starke Klebkraft auf der Kleidung
- Geeignet für die Anwendung auf der Kleidung
- Kein Vorwärmen nötig

**FR**

- Jusqu'à 12 heures de chaleur bienfaisante
- Développement de chaleur particulièrement rapide
- Auto-activation par contact avec l'air
- Forte adhérence sur les vêtements
- Convient pour l'application sur les vêtements
- Pas de préchauffage nécessaire

**ES**

- Hasta 12 horas de calor relajante
- Desarrollo del calor especialmente rápido
- Autoactivación por contacto con el aire
- Gran adherencia a la ropa
- Adecuado para aplicar sobre la ropa
- No necesita precalentamiento

**EN**

- Up to 12 hours of soothing heat
- Particularly fast heat development
- Self-activating through air contact
- Strong adhesion to clothing
- Suitable for application on clothing
- No preheating necessary

**IT**

- Fino a 12 ore di calore rassicante
- Sviluppo del calore particolarmente rapido
- Si auto-attiva attraverso il contatto con l'aria
- Forte adesione agli indumenti
- Adatto per l'applicazione su indumenti
- Non è necessario il preriscaldamento

**Anwendung / Application / Applicazione / Applicazioni / Aplicación:****1****2**

Auf Kleidung anzuwenden.  
Attach to clothing.  
A fixer sur les vêtements.  
Applicare agli indumenti.  
Fijar a la ropa.

**3****4**

**Anwendungsbereiche**

*Application areas*

*Domaines d'application*

*Aree di applicazione*

*Ámbitos de aplicación*



**Nacken**

*Neck*

*Cou*

*Collo*

*Cuello*



**Schulter**

*Shoulder*

*Épaule*

*Spalla*

*Hombro*



**Rücken**

*Back*

*Dos*

*Schiena*

*Volver*



DE Wärmepflaster  
EN Heat patch  
FR Patch chauffant  
IT Cerotto termico  
ES Parche de calor



**10x**  
1x  
Balkenverband  
Adhäsiv  
10 x 13 cm

